

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Taboret prysznicowy okrągły z systemem TF

Kod produktu: TGR-R KP-O 3432



1. Wykonanie


Taboret prysznicowy składa się z aluminiowej ramy, okrągłego siedziska wykonanego z wytrzymałego PCV oraz nóg zakończonych gumowymi nasadkami antypoślizgowymi. Dzięki skokowej regulacji wysokości, posiada możliwość indywidualnego dostosowania do wzrostu pacjenta. Dodatkowo taboret został wyposażony w system TF ułatwiający montaż.

Zestaw zawiera:

- siedzisko- 1 szt.
- rurki podstawy taboretu- 2 szt.
- nóżki z regulacją wysokości- 4szt.
- śruby montażowe TF (motylki)- 5 szt.

Części składowe:

- a. siedzisko
- b. rurki podstawy
- c. regulacja wysokości- system TF
- d. nasadki antypoślizgowe

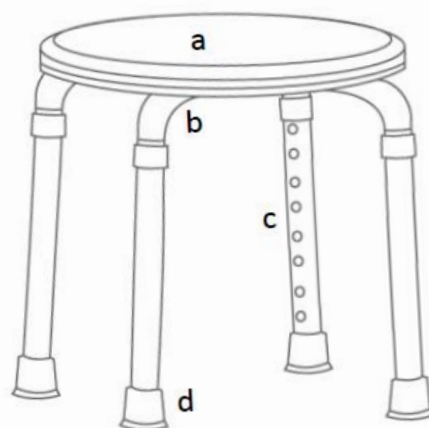

2. Zastosowanie

Taboret prysznicowy jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi wykonywanie czynności higienicznych. Polecany jest osobom o obniżonej sprawności ruchowej, która

uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne wykonywanie czynności życia codziennego. Taboret polecany jest do stosowania pod prysznicem, w wannie, łazience i innych wilgotnych pomieszczeniach, w warunkach domowych i szpitalnych.

3. Montaż

Krok 1. Siedzisko taboretu należy położyć płasko na podłożu.

Krok 2. Następnie za pomocą pięciu śrub motylkowych z podkładkami należy zmontować siedzisko ze skrzyżowanymi rurkami podstawy taboretu.

Krok 3. Rurki podstawy taboretu należy połączyć z nóżkami.

REGULACJA WYSOKOŚCI

- Aby wyregulować wysokość taboretu, należy wcisnąć metalowy sztyft, wybrać odpowiednią wysokość nóżki, a następnie zablokować położenie względem siebie sztyftem blokującym. Nóżki regulowane są skokowo co 2,5 cm.

Uwaga! Sztyfty we wszystkich nóżkach muszą być ustawione na tym samym poziomie.

4. Specyfikacja techniczna

| | |
|-----------------------|-----------|
| Szerokość | 33 cm |
| Wysokość | 36- 54 cm |
| Średnica siedziska | 32 cm |
| Waga | 1,85 kg |
| Maksymalne obciążenie | 136 kg |

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z taboretu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja










- Taboret należy czyścić regularnie używając wody, gąbki i łagodnych środków czyszczących do tworzyw sztucznych np. mydła lub delikatnych detergentów posiadających atest PZH, po każdym użyciu wycierać do sucha.
- **Nie należy używać** do czyszczenia: silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników (grozi uszkodzeniem ramy, widocznymi ubytkami, a w konsekwencji - utratą praw gwarancyjnych).
- Należy systematycznie sprawdzać:
 - dokręcenie śrub motylkowych
 - stan sztyftów blokujących
 - stan rurek (pod kątem pęknięć)

Zaleca się regularną kontrolę nasadki gumowej. W przypadku zużycia, należy wymienić nasadkę na nową.

7. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej, jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

8. Oznaczenia

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Numer referencyjny |  | Producent |
|  | Numer serii |  | Data produkcji |
|  | Numer seryjny |  | Wyrób medyczny |
|  | Uwaga |  | Zapoznaj się z instrukcją |
|  | Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych. | | |

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. Dowiedz się więcej na www.timago.com

Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com



Wydanie II, data aktualizacji 29.03.2021